

ハンズフリーで、
場所を選ばず
マッサージ。



- ◎電源コードのいらぬ電池仕様です。
操作部を首から下げてハンズフリーでマッサージ。
- ◎おかつろぎのひとつき、お仕事をしながら、家事をしながら等
使用する時と場所を選ばない多様な使い方が可能です。
- ◎4種類の振動モードでお好みのマッサージを楽しめます。

PORTABLE COMFORT

Clipple

ポータブルコンフォート クリップル

日本製

チェリーピンク 4945068530112
サファイヤブラック 4945068530129



チェリーピンク

サファイヤブラック

マッサージの
あたらしいかたち。



※写真はイメージです。

使い方のポイント

- 操作部を付属のストラップで首からさげると、ボタン操作が楽にできます。
ストラップは必要に応じて付属のアジャスターで長さを調節してください。
さらに、操作部を補助クリップで少し引っ張るように衣服に固定すると安定します。(図1)
- 振動部をベルトやスカーフ等で上から軽く押さえ身体に密着させると、より効果的にご使用になれます。
- 振動部の固定の仕方、ひじ・わき腹・太もも・ふくらはぎ等、お好みの部位にご使用になれます。振動部のクリップでは装着できない部位にご使用の際は、ベルト等で固定すると便利です。必要に応じてご自分でご用意ください。

ご注意

◎柔らかな素材の衣服やマフラー等に装着すると、布地を傷める場合がありますので、取付け・取外しの際は充分にご注意ください。

図1



使用例




※写真は使用方法をより判りやすく説明するためのイメージ写真です。家庭用マッサージ器は素肌での使用は禁じられています。

PORTABLE COMFORT

Clipple ポータブルコンフォート クリップル

■各部の名称

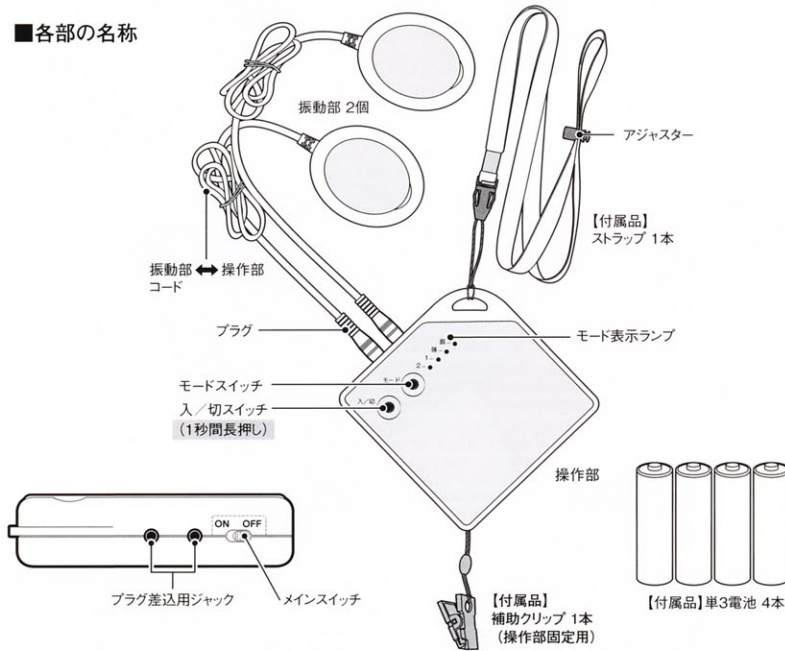

■仕様

- ◎販売名:クリップル ◎医療機器認証番号:221AGBZX00234A01 ◎分類:管理医療機器 ◎種類:機械器具(77)バイブレーター ◎一般的名称:家庭用電気マッサージ器 ◎製造国:日本
- <本体>
- ◎使用電源:単3電池4本 ◎定格電圧:DC6V ◎消費電力:1.4W ◎定格時間:15分
- ◎感電に関する保護のクラス:クラスIII ◎タイマー時間:15分 ◎振動数 強:4000回/1分弱:3000回/分 ◎安全装置:電子タイマー15分/過電流防止装置 ◎寸法 操作部:縦8.2×横8.2×高さ2.0cm/振動部:縦5.4×横4.2×高さ3.1cm ◎コード長さ:70cm ◎重量:約270g(電池4本含む)
- <付属品>
- ◎アジャスター付ストラップ ◎補助クリップ ◎単3電池4本(動作確認用)

※印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

⚠安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ※次の人は、**使用しないでください。**
 - ◎医師からマッサージを禁じられている人:例血栓(塞栓)症、重度の動脈硬化(痛)、急性静脈硬化(痛)、各種皮膚炎及び皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む。)など◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人。
 - ※次の人は、**使用前に医師に相談してください。**
 - ◎心臓に障害のある人◎ペースメーカー等体内植込型医用電気機器を使用している人◎悪性腫瘍のある人◎妊娠初期の不安定期又は出産直後の人◎糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう症の人◎脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の人◎治療部位に異常(感染症、創傷など)のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動)の強い時期◎衰弱している時◎安静を必要とする人や著しく体調のすぐれない時◎脊椎(せきつい)に異常のある人◎背骨が曲がっている人◎その他医療機関で治療中の人◎上記以外に身体に特に異常を感じている時◎使用しても効果が現れない場合
 - ※特定の病気をもちたてない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
 - ※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やベルトを本体の周辺で遊ばせたり、本体の上のせたりしないでください。事故やケガの原因になります。

的場電機はこれからも皆様の健康のために。

株式会社的場電機製作所は1962年設立以来、小型精密モーターの開発に真摯に取り組む、その技術は健康機器・医療機器の分野へ広がっています。ローラーマッサージ機(SRシリーズ)に於いては、1983年の製造開始から現在に至るまでたくさんのお客様にご愛用頂き、販売実績は200万台を数えます。皆様の健康のために、これからも今まで以上に意識して本当の“ものづくり”に専念していきます。

製品に関するお問合せ、ご相談は当店で

製造販売業者



株式会社 的場電機製作所

本社: 〒350-1101 埼玉県川越市地場2627
TEL 049-231-2255 FAX 049-231-6789
URL <http://www.matoba.co.jp>

製造販売業許可番号 11B2X00062